



EXCLUSIVITE STEALTH PRODUCTS

Peu importe la saison ou la situation, notre revêtement breveté CoolCore vous offre un confort et une thermorégulation exceptionnels. Oubliez la transpiration, votre housse CoolCore vous aide à rester au sec.

Fabriqué sans produit chimique, le revêtement CoolCore ventile et élimine l'humidité en favorisant son évaporation et vous procure une sensation de fraîcheur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES COUSSINS STEALTH PRODUCTS

Modèle	Capacité de poids	Hauteur du coussin	Largeurs disponibles	Profondeurs disponibles	Poids du coussin
Simplicity G	181 kg	50 mm	254 - 610 mm	254 - 610 mm	0,9 kg
Zen SP	204 kg	76 mm	254 - 610 mm	254 - 610 mm	1,6 kg
Glacial SP	181 kg	64 mm	254 - 610 mm	254 - 610 mm	1,2 kg
Premiere P	250 kg	89 mm	406 - 559 mm	406 - 559 mm	1,6 kg
Spectrum Foam SPP	272 kg	76 mm	406 - 813 mm	406 - 711 mm	1,4 kg
Spectrum Gel SPP	250 kg	76 mm	356 - 610 mm	406 - 610 mm	1,6 kg
Solution SPP	227 kg	76 mm	254 - 610 mm	254 - 610 mm	2,5 kg
Tru Comfort 2 SPP	204 kg	114 mm	406 - 559 mm	406 - 610 mm	1,8 kg
Essence SPP	227 kg	89 mm	406 - 559 mm	406 - 610 mm	1,6 - 2,3 kg

SOLUTIONS D'ASSISE





GUIDE DES ETIQUETTES

Pour vous aider dans votre choix, tous nos coussins Stealth Products sont équipés d'une étiquette de couleur. La couleur de l'étiquette indique la fonction du coussin.



quantumrehab.fr



Simplicity G

Ce coussin est uniquement composé d'une base moulée haute densité, son profilage anatomique lui procure des qualités de stabilité et joue un rôle non négligeable sur le bon positionnement du bassin. Il contribuera au contrôle postural des utilisateurs nécessaire à la station assise sans en limiter la fonctionnalité.




Spectrum Gel SPP

Ce coussin est composé d'une base moulée haute densité. Le profil plat facilite les transferts autonomes, assure un guidage ainsi qu'un contrôle postural du bassin et des membres inférieurs. Un insert en gel double cellule est intégré dans la partie ischiatique pour protéger cette zone osseuse à risque. La couche supérieure est en Sunmate XXsoft (bleue)




Essence SPP

Ce coussin est composé d'une première base rigide en ABS sur laquelle les biseaux fessiers peuvent être mis en place puis une deuxième moulée de haute densité. Le profil modulable offre ainsi une correction latérale personnalisée. La cuvette ischiatique peut être accentuée pour limiter le glissement. Les éléments de formes déchargent la zone du sacrum. La couche

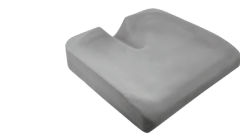

Il est indiqué pour des personnes ne présentant pas de besoins de prévention cutanée. Il est équipé d'une housse de couverture en Tek incontinence.

Points forts :
profil anatomique efficace, fonctionnalité, stabilité

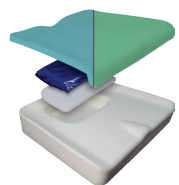

pour les tailles inférieures en largeur à 22" et en medium (vert) pour les tailles au-dessus de 22". Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil.

Points forts :
protection cutanée, insert en gel double cellule, contrôle postural du bassin et des membres inférieurs




supérieure est en viscosse. Une pochette avec fermeture éclair permettent le rangement d'un smartphone ou d'un portefeuille. Biseaux fessiers disponibles en sus.

Points forts :
modularité, mobilité, stabilité




Glacial SP

Le profil plat facilite les transferts autonomes. La découpe de la cuvette permet une décharge importante du sacrum et accentue le soutien du coccyx. Le gel quadrillé qui recouvre l'ensemble optimise la protection de la peau (efficace si risque de cisaillement). Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le

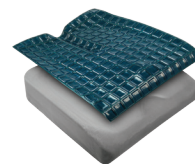

coussin sur son fauteuil. La base en mousse haute densité moulée garantie une efficacité dans le temps.

Points forts :
décharge sacrée, gel carrelé, léger profil

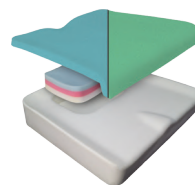

Spectrum Foam SPP

Ce coussin est composé d'une base moulée haute densité. Le profil plat facilite les transferts autonomes, assure un guidage ainsi qu'un contrôle postural du bassin et des membres inférieurs. Un insert triple épaisseur en mousse viscosse de différentes densités est intégré dans la partie ischiatique pour protéger cette zone osseuse à risque. La couche supérieure est



Solution SPP

Coussin composé d'une base moulée haute densité avec un profilage anatomique et d'une couche de viscoélastique sur la partie supérieure. Ce coussin assure une bonne répartition des pressions sur toute sa surface, son guidage anatomique léger permet à la fois une stabilité posturale mais offre également une fonctionnalité non négligeable. L'insert en

double cellule de gel fluide, assure une protection de qualité au niveau des zones à risque. Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil.

Points forts :
protection cutanée, insert gel bicellulaire, mobilité, confort



Première P

Ce coussin est composé d'une base moulée haute densité avec un insert de positionnement latéral intégré. Le profilage, la découpe sacrée et les recharges latérales de la base de ce coussin associé à la couche de Sunmate Xsoft supérieure lui procure les qualités de positionnement importante (stabilité,




répartition des appuis). Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil. La base en mousse haute densité moulée garantie une efficacité dans le temps.

Points forts :
stabilité et maintien, découpe sacrée, recharge trochantérienne (renfort)



Tru-Comfort 2 SPP

Coussin composé d'une base moulée haute densité avec un profilage anatomique profond qui permet un accueil postural optimal avec un confort très important, et une limitation du risque de glissement. La partie avant est conçue pour optimiser la charge crurale et favoriser le maintien postural. La base est recouverte d'une couche de viscoélastique pour apporter une

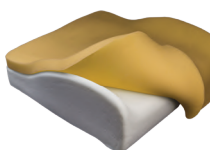


protection cutanée et une sensation agréable à l'utilisateur. Deux pochettes avec fermeture éclair permettent le rangement d'un smartphone ou d'un portefeuille.

Points forts :
confort, stabilité, contrôle postural



Zen SP

Ce coussin est composé d'une base moulée haute densité, la couche supérieure est en Sunmate XXsoft. Le profil plat facilite les transferts autonomes. Une importante cuvette permet une décharge importante du sacrum et accentue le soutien du coccyx. Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner

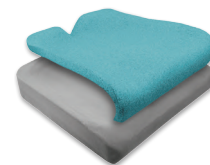

le coussin sur son fauteuil. La base en mousse haute densité moulée garantie une efficacité dans le temps.

Points forts :
léger, fonctionnel, décharge sacrée