



SANS EFFORT

POSTURE

CONTRÔLE

La mobilisation posturale est indispensable pour une installation assise fonctionnelle.

Actuellement, aucun système sur le marché ne répond à ce besoin. Epic Seating permet des changements de posture tout au long de la journée, selon les besoins fonctionnels.

Pourquoi est-ce si important ?

Nous bougeons tous, que ce soit à un niveau micro ou macro. Ces mouvements nous permettent de répondre à des besoins essentiels tels que le soulagement de la pression, la gestion de la fatigue, la digestion, la respiration ou encore l'interaction sociale.

SCAN ME



PRIDE
MOBILITY
LIVE YOUR BEST®



*Je veux
essayer*

Caractéristiques du système Epic Seating

Configuration telle que présentée :



Point de pivot anatomique

Le point de pivot part de l'utilisateur, et non du châssis. Le mouvement s'effectue au-dessus du bassin, et non à partir de l'assise.

Réglage sans outils

Epic Seating permet aux aidants d'ajuster facilement et rapidement la posture de l'utilisateur sans outils. L'angle du dossier et l'amplitude du mouvement sont modifiables sans équipement particulier.

Soulagement indépendant

En mode "actif", l'utilisateur peut librement explorer différentes inclinaisons pour adopter la posture qui maximise ses capacités fonctionnelles. Une fois l'activité terminée, le système permet un retour automatique à une position neutre, sans intervention de l'aidant.

Inclinaison sans le EPIC:

Lorsque le dossier s'incline, il glisse vers le haut par rapport au corps de l'utilisateur, ce qui génère des forces de friction et de cisaillement. Lors du retour en position neutre, un glissement se produit au niveau du bassin, entraînant à nouveau des forces de friction et de cisaillement sur la surface de l'assise.


Les éléments de positionnements, tels que l'appui-tête et les cale tronc, se déplacent également avec le dossier lors de l'inclinaison, ce qui nécessite un réajustement mécanique par un aidant.

Inclinaison avec le EPIC:


Le système intègre un support pelvien fixe ajustable associé à un dossier mobile. Il comprend également un point de pivot anatomique, permettant de faciliter le mouvement sans modifier la configuration des dispositifs de soutien à la posture.

Tous les éléments de positionnement fixés au mécanisme suivent naturellement les mouvements du corps, éliminant ainsi le besoin de repositionnements manuels.

Fonctionnement Dossier Classique

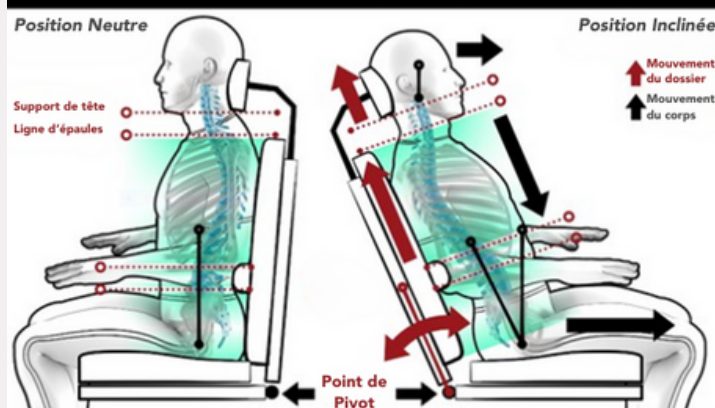

Fonctionnement Dossier EPIC

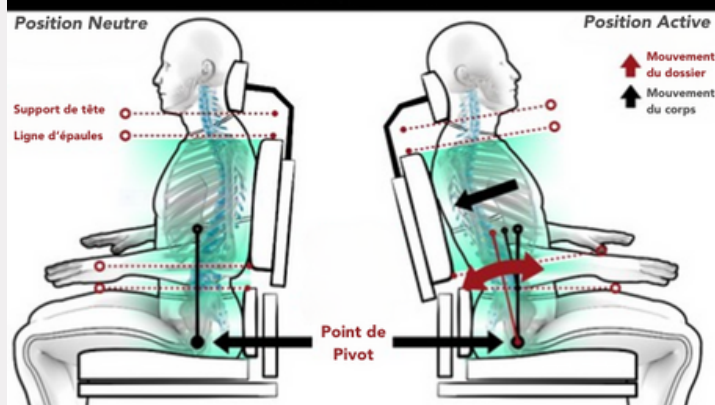

Pride Mobility Products France
26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
France
Tel: 04 81 65 94 70
pridemobility.fr - contact@quantum-rehab.fr



www.pridemobility.fr
FR_SS_EPIC/Rev0/30AVRIL2025