



QUANTUM®  
**OUTBACK**



**REPOUSSEZ LES LIMITES !**  
**L'EXPLORATION**  
**SANS FRONTIERES !**





## **Outback – L’Aventure Sans Limite**

*Dominez les éléments avec ce fauteuil tout-terrain. Grâce à sa motorisation 4x4, sa suspension performante et ses pneus robustes, explorez sentiers, pentes et chemins en toute confiance.*



### Facilitez vos manœuvres

Augmentez votre sécurité grâce à la caméra de recul.

### Electronique Qlogic

Adaptez la conduite avec des commandes au menton, à la tête ou autres solutions adaptées.

### Suspension SRS

Une conduite plus douce et confortable sur tous les terrains.

### Transmission 4x4

Conçus pour affronter tous les terrains et vous accompagner en toute confiance, partout où l'aventure vous mène.

### Assise TruBalance 3

Pour un positionnement personnalisé optimal.

### Confort et Stabilité

4 fonctions d'assise pour plus de stabilité et une utilisation prolongée.

### Tout-Terrain

Conçu pour l'extérieur, l'Outback excelle sur gravier, herbe et terrains difficiles grâce à ses roues 15" pneumatiques Knobby.

### Éclairage LED Complet

Visibilité et sécurité, de jour comme de nuit.



### Suspension SRS

Inspirée de l'automobile, elle offre un contrôle de conduite exceptionnel et une stabilité accrue. Conçue spécialement pour le Quantum Outback, elle améliore le confort et la sécurité sur tous les terrains.



### Avantages :

- Confort optimal sur terrain accidenté grâce à l'absorption des chocs sur gravier, herbe et pavé.
- Maintien de la stabilité, même lors de la montée de pentes, pour une conduite plus sûre.

### Eclairage LED



Le système d'éclairage LED, activé par interrupteur, améliore la visibilité et la sécurité avec des LED installées sur le capot avant et à l'arrière des garde-boues, au-dessus des pneus.



La Q-Logic offre un contrôle intuitif et personnalisable, améliorant votre indépendance et votre connectivité avec des options Bluetooth et IR.

# Specifications

<b>ROUES MOTRICES</b>	Standard: 15" Pneumatique
<b>VITESSE MAXIMALE (1)</b>	9.66 km/h
<b>GARDE AU SOL</b>	12.49 cm (moteur)
<b>GIRATION (2)</b>	124.96 cm
<b>LONGUEUR HORS-TOUT (2)</b>	106.68 cm
<b>LARGEUR HORS-TOUT (base)</b>	73.15 cm
<b>SUSPENSION</b>	Indépendante type SRS
<b>AUTONOMIE (3)</b>	Jusqu'à 25 km
<b>TAILLES D'ASSISES (cm)</b>	
<b>TRU-Balance® 3 Standard</b>	<b>Largeur:</b> de 40.6 cm à 55.8 cm <b>Profondeur:</b> de 40.6 cm à 55.8 cm
<b>TRU-Balance® 3 Lift</b>	<b>Largeur:</b> de 40.6 cm à 55.8 cm <b>Profondeur:</b> de 40.6 cm à 55.8 cm
<b>HAUTEURS D'ASSISES (cm)</b>	
<b>TRU-Balance® 3 Standard (5)</b>	48.2, 50.8, 53.3
<b>TRU-Balance® 3 Lift (5)</b>	49.5, 52.0, 54.6
<b>BATTERIE (3)</b>	2x 12V 95Ah (2)
<b>POIDS BATTERIE (6)</b>	53.3 kg
<b>ELECTRONIQUE (7)</b>	120A Q-Logic 3
<b>CHARGEUR</b>	8 Amp
<b>ELECTROFREINS</b>	Régénératifs
<b>MOTEUR</b>	4 moteurs 4 poles
<b>FRANCHISSEMENT</b>	10.16 cm
<b>POIDS MAX UTILISATEUR (4)</b>	136 kg. (TRU-Balance® 3)
<b>POIDS DE LA BASE</b>	76.5 kg.

- 1) La vitesse varie en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de la charge de la batterie, de l'état de la batterie et de la pression des pneus.
- 2) Sans repose jambes ou pieds;
- 3) La capacité de la batterie peut changer lorsqu'un système de positionnement de puissance est ajouté.
- 4) La capacité de poids est déterminée par le choix du siège.
- 5) Toutes les mesures +/- 0.3cm avec siège 18" x 18", capacité de poids de 136 kg et pneus pneumatiques. Les largeurs peuvent augmenter la hauteur du siège au sol. Contactez le service client pour plus de détails.
- 6) Le poids de la batterie peut varier de +/- 1.5 kg en fonction du fabricant.
- 7) Tout les fauteuils Quantum Rehab® peuvent être configurés avec des commandes spéciales.




*Je veux essayer*

## Equipements de serie

- Moteurs 4 pôles
- Eclairage LED
- SRS Suspension
- Assise TRU Balance 3
- Electronique Q.Logic 3 lite

## Couleurs

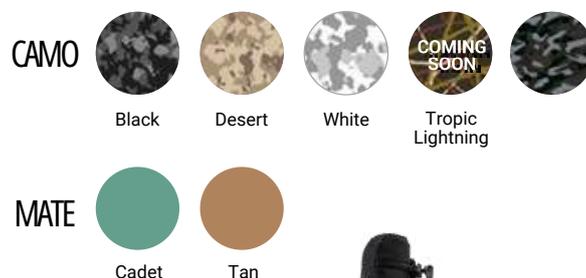

Pride Mobility Products France  
26 rue Monseigneur Ancel  
69800 Saint-Priest  
France  
Tel: 04 81 65 94 70  
pridemobility.fr - contact@quantum-rehab.fr



www.pridemobility.fr

FR\_SS\_OUTBACK/Rev0/09mar2025