

# GOOGO<sup>®</sup>

CARBON



**Léger,  
Pliable  
&Pratique.**

Le futur de la mobilité


**PRIDE<sup>®</sup>**  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST<sup>®</sup>

# Le scooter qui allie légèreté, robustesse et praticité



Poids max utilisateur	136 kg
Rayon de giration	135 cm
Largeur hors tout	445 mm
Longueur hors tout	1025 mm
Vitesse maximale	6 km/h
Garde au sol	38 mm
Roues Avants	7 pouces bandages
Roues Arrières	8 pouces bandages
Motorisation	Roues arrières motrice, 24 volt brushless
Système de freinage	Roues arrières motrice, 24 volt brushless
Hauteur d'assise	59 cm
Poids du scooter	Sans batteries: 16.6kg Batterie: 1.8kg
Batteries	Lithium 12Ah

Le Go Go® Carbon est conçu avec un cadre en fibre de carbone ultra-léger et robuste. Cette structure de châssis garantit une grande durabilité tout en facilitant les déplacements et les manipulations. Avec un poids de seulement 16,6kg (sans batterie), il est parmi les scooters les plus légers de sa catégorie.

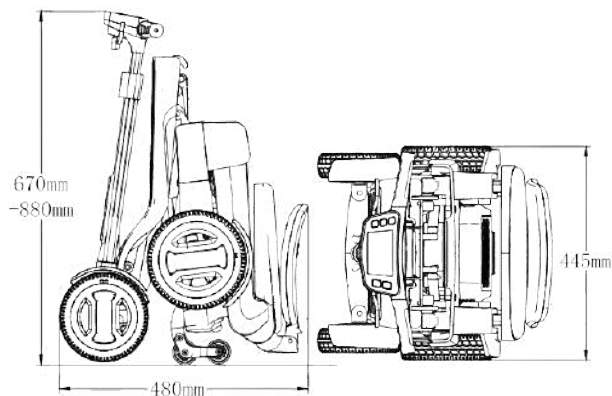

Son pliage rapide le rend incroyablement facile à transporter. Que ce soit pour les déplacements quotidiens ou les voyages.



Une fois plié, il se déplace comme un bagage à roulettes. Pratique pour les aéroports ou les endroits bondés, il se glisse aisément dans un coffre de voiture ou un compartiment de rangement.



Le Go Go® Carbon fonctionne avec une batterie au lithium, offrant ainsi une excellente autonomie sans alourdir l'appareil.



Pride Mobility Products France  
26 rue Monseigneur Ancel  
69800 Saint-Priest  
France  
Tel: 04 81 65 94 70  
pridemobility.fr - contact@quantum-rehab.fr



www.pridemobility.fr

FR\_SS\_GOGOCARBON/Rev0/29OCT24